

Спокойной ночи, апноэ.

www.somnosmart.de

SOMNOsmart 2

WEINMANN

НОВИНКА! SOMNOsmart 2

- ТОЧНОСТЬ
- ЭФФЕКТИВНОСТЬ
- ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Приемлемость
терапии
гарантирована.

WEINMANN
medical technology

Добрый день, SOMNOsmart 2 !

Начинается новая эра в АРАР-терапии: SmartPAP с помощью SOMNOsmart 2.

Лечение SmartPAP - это дальнейшая разработка уже известного принципа терапии АРАР (лечения с помощью автоматического подбора положительного давления воздуха - automatically positive air pressure).

Точность

- точное распознавание событий, базирующееся на регистрации сигналов осцилляторного давления, потока и храпа
- высочайшая точность при регистрации и анализе храпа, ограничения потока, апноэ и гипопноэ
- безошибочное распознавание обструктивных событий и событий центрального генеза
- точность при определении артефактов, утечек и дыхания ртом

Эффективность

- уникальный по своей надежности алгоритм
- эффективная адаптация давления – надежная, плавная и щадящая

Экономичность

- простота в управлении
- быстрая установка терапевтических параметров
- ускоренный процесс передачи данных на компьютер
- оперативный терапевтический контроль

Кроме того...

- очень тихий прибор с большим сроком службы
- наличие удобных режимов Softstart (мягкий старт – функция постепенного выхода на рабочий режим) и AutoStart (режим активизации прибора в зависимости от наличия дыхания)
- хорошо зарекомендовавший себя увлажнитель воздуха SOMNOclick, присоединяется без дополнительных кабелей и шлангов
- усовершенствованная концепция гигиены
- запоминание сигналов, респираторных событий и данных по приемлемости лечения пациентом
- интерфейс для взаимодействия с программным обеспечением SOMNOsupport и SOMNOadjust, а также с полисомнографом

Технические данные:

средний уровень шума: ок. 28 дБ (А) при 10 см Н₂O, • вес: 3,6 кг,
диапазон лечебного давления АРАР: от 4 до 18 гПа, • точность поддержания терапевтического давления: ± 0,4 гПа
система фильтров: фильтры грубой и тонкой очистки, • габариты: 18x9x32 см




SOMNOsmart 2 с увлажнителем SOMNOclick

SOMNOsupport

программа установки и анализа параметров
для аппарата SOMNOsmart 2

- установка всех значимых для лечения параметров
- детальное представление сигналов и событий во время титрации
- графическое изображение и оценка курса терапии и данных по приемлемости терапии пациентом

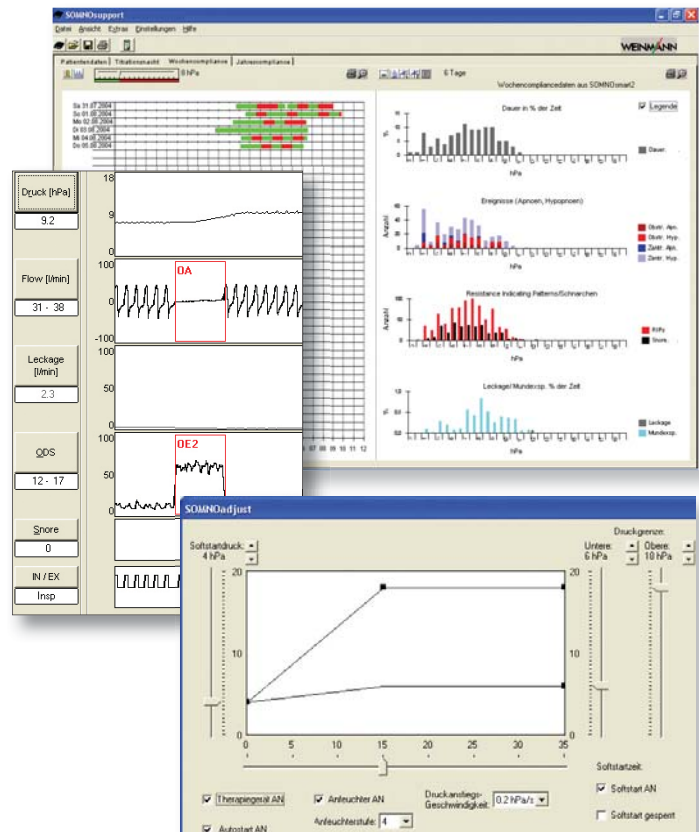

WEINMANN GmbH + Co. KG
Kronsalsweg 40
225525 Hamburg
Tel. +49 (40) 547 02 0
info@weinmann.de
www.weinmann.de

Контактные данные WEINMANN в России:
тел./факс (495) 730 20 57, 161 63 81, 101 33 09, (916) 637 35 33

WEINMANN
medical technology